




Открытое акционерное общество "Ратон"

Кушетка массажная КМ-1

Паспорт

*Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.2914/2508 от 16.03.2021*

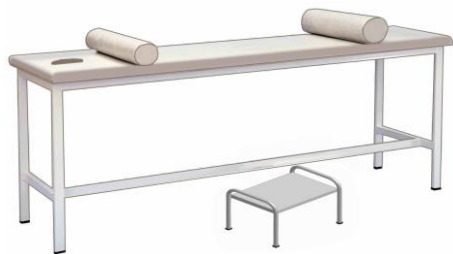

1 Назначение

Кушетка массажная КМ-1 (далее - кушетка) предназначена для удобного размещения на ней пациента при проведении разностороннего массажа в лечебных, физкультурно-оздоровительных, санаторно-курортных и других медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кушетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры кушетки (длина x ширина x высота), мм - 1830 x 650 x 805.

Габаритные размеры ступени (длина x ширина x высота), мм - 410 x 300 x 345.

Габаритные размеры валиков: длина – 500 мм, диаметр – 100 мм и 150 мм.

Масса кушетки не более 52 кг, масса ступени не более 2,5 кг.

Максимальная нагрузка на кушетку и ступень 125 кг.

Кушетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Кушетка массажная КМ-1 – 1 шт., в том числе:
ступень – 1 шт, валики – 2 шт.
Паспорт – 1 шт.

4 Устройство и подготовка кушетки к эксплуатации

Подготовка кушетки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Кушетка представляет собой конструкцию повышенной устойчивости, выполнена из усиленного каркаса, изготовленного из стального профиля с нанесением эпоксидно-полимерного покрытия, и мягкого ложа с обивкой винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. В ложе предусмотрено отверстие для лица (по согласованию с заказчиком отверстие может не выполняться). Для удобства пользования кушетка укомплектована двумя валиками различного диаметра и ступенью для подъема пациента на кушетку.

Освободите кушетку, ступень и валики от упаковки.

Произведите санитарную обработку кушетки, ступени и валиков средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению.

После этого кушетка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Кушетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи кушетки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении кушетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246044, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
ОАО «Ратон»
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24
e-mail: info@raton.by

7 Свидетельство о приемке

Кушетка массажная КМ-1 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА Гарантийный талон изъят (дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)	----- Линия отреза -----	
	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	
	Изделие медицинского назначения: Кушетка массажная КМ-1 (наименование)	
	ТУ РБ 14440234.001-94 (номер ТУ)	
Дата изготовления _____ (заполняется предприятием-изготовителем)		
Приобретена _____ (дата, № ТТН заполняется потребителем)		